

## Kraftvolles Piezo - Zahnsteinentfernungsgerät mit Endo – Funktion



Dieses formschöne und kompakte Tischgerät arbeitet konstant im Bereich von 33.5 KHz. und gewährleistet so eine effiziente und zugleich schonende Entfernung von Zahnbelägen. Die Leistungsstärke lässt sich auf der oberen Frontseite durch einen Drehregler stufenlos regeln.


Auch die Wassermenge für den notwendigen Spraynebel kann auf der Rückseite des Gerätes dem jeweiligen Bedarf angepasst werden.

Das superleichte Titan Handstück ist bei 134° autoklavierbar.

Zum Aufarbeiten von Wurzelkanälen wird der mitgelieferte Kanalfeilenhalter auf das Handstück aufgeschraubt, und mit der entsprechenden Kanalfeile bestückt.

### Im Lieferumfang enthalten:

- Titanhandstück
- 3 Stk. ZEG Arbeitsspitzen
- Endo – Aufsatz für Kanalfeilen
- Set Kanalfeilen
- Schlüssel zum Spitzenwechsel
- Fußschalter

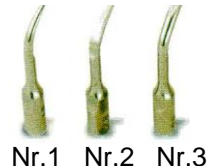

### Technische Daten:

- Spannung 230V / 60Hz
- Frequenz 33.5 KHz
- Leistung 20W – 40W
- Gewicht 2200 Gr.
- Wasserdruck 1-4 Bar
- B150mm T130mm H110mm



**Preis zzgl. MwSt. € 599.--**